



Optical
Discount.



Qui sommes-nous?

**Une compétence remarquable dans la fabrication des verres optiques:
L'Engagement de V2i envers la Qualité et le suivi des innovations.**

Au cœur de Bastia se trouve V2i, un laboratoire de fabrication spécialisé dans la production de verres optiques. Depuis sa création en 1995 en tant que S.A.R.L. VERRES INDUSTRIE INSULAIRE, ou plus communément appelé "Verres 2i", ce laboratoire s'est **distingué par son engagement envers la qualité et le professionnalisme à chaque étape de son processus de fabrication.** Les équipements et les process de dernières générations imprègnent chaque aspect de son fonctionnement. L'acquisition régulière de machines de pointe et la mise en œuvre de technologies innovantes repoussent les normes de l'industrie.

Avec une expérience de plus de deux décennies, Verres 2i a fait preuve d'un engagement constant envers l'amélioration continue. Depuis ses modestes débuts jusqu'à ses installations actuelles de 350 m², l'entreprise a investi dans des technologies de pointe pour garantir l'excellence de chaque paire de verres produites. L'adoption de la technologie FreeForm en 2008 a marqué un jalon significatif dans sa capacité de fabrication, permettant **la création de designs personnalisés et l'optimisation de la précision de chaque verre.**

L'envie de s'améliorer se reflète dans chaque étape franchie par Verres 2i au fil des ans. De l'obtention de la certification ISO 9001-2008 en 2015 à la récente migration vers le logiciel avancé LensWare en 2023, l'engagement de l'entreprise envers **la qualité et l'innovation est indéniable.** L'installation d'équipements de pointe, tels que le MC380X2 (Traitement sous-vide) en 2022, témoigne de son dévouement à rester à la pointe de la technologie de fabrication des verres.

Historique

- **1995** - Création de la S.A.R.L VERRES INDUSTRIE INSULAIRE ou « Verres 2i »
Laboratoire de surfaçage de verres et de montages de lunettes qui vient en complément des activités de vente optique.
- **1999** - La S.A.R.L VERRES INDUSTRIE INSULAIRE investi dans des machines automatique de traitement Durci et Antireflet.
- **2006** - Déménagement de la S.A.R.L VERRES INDUSTRIE INSULAIRE dans de nouveaux locaux de 350 m² (Local actuel).
- **2008** – Passage à la technologie d'usinage point par point « FreeForm »
 - Générateur FreeForm de la marque Leader Satisflo
 - Polisseuse numérique
 - Nouvelle machine de Coating sous-vides pour des traitements Super hydrophobes/ oléophobes et antistatiques.
- **2010** Nouveaux design FreeForm
- **2012** Acquisition d'une nouvelle chaine de surfaçage FreeForm
- **2014** - Remplacement de notre machine de traitement Durci (Hardcoated)
- **2015** - Certification ISO 9001-2008
- **2017** - Installation d'une nouvelle machine de traitements sous vide et installation du process lumière bleue (BlueZen) et nouveau système de blocage
- **2019** - Installation Orbit2 (Générateur à chargement automatique)
- **2021** - Installation Multiflex (Polisseuse à chargement automatique) et automatisation complète du surfaçage des verres.
- **2022** - Installation MC380X2 (Machine de traitement sous-vide en remplacement de la MC380FlipOver)
- **2023** - Migration vers le logiciel LensWare
- **2024** – Nouvelle chaine de surfaçage

À travers chaque avancée technologique et chaque investissement stratégique, Verres 2i a affirmé sa volonté de coller aux **références de l'industrie de la fabrication de verres optiques et solaires**. Son approche méticuleuse de la qualité, soutenue par une profonde tradition d'artisanat, garantit que chaque paire de lunettes qui quitte ses installations est un témoignage de son engagement envers la perfection et la satisfaction du client.



Index

Qui sommes-nous?	2
Nos technologies	6
Notre catalogue des verres	12
Prestige Equilibre2	16
Prestige Expert2	18
Prestige Horizon2	20
Prestige Lecture2	22
Prestige Flex	24
First OD HD	26
Prestige Drive	30
Reader 3	32
Unitek 2	36
Relax	38
Myoless (prochainement)	42
Traitements	44
Paramètres de Personnalisation	48
Puissance Compensée	50
Guide Pratique de Prise de Mesures	52
Marquages	56



Nos technologies

FREE-FORM LENS DESIGNS

Nos technologies

IOT Digital Ray-Path 2

Méthodologie Steady


IOT Digital Ray-Path 2: Une véritable révolution

En plus de compenser mathématiquement les aberrations obliques dans les verres personnalisés et compensés free-form, IOT Digital Ray-Path 2 ajoute l'utilisation intelligente de l'accommodation du porteur : les petits ajustements de puissance que les yeux font naturellement pour voir des objets à différentes distances.



Dépassant les limites de la géométrie dans la personnalisation des verres

IOT Digital Ray-Path 2 dépasse les limites de la géométrie dans la personnalisation des verres en incorporant la capacité accommodative du porteur dans le calcul final du verre pour minimiser encore plus les aberrations obliques.

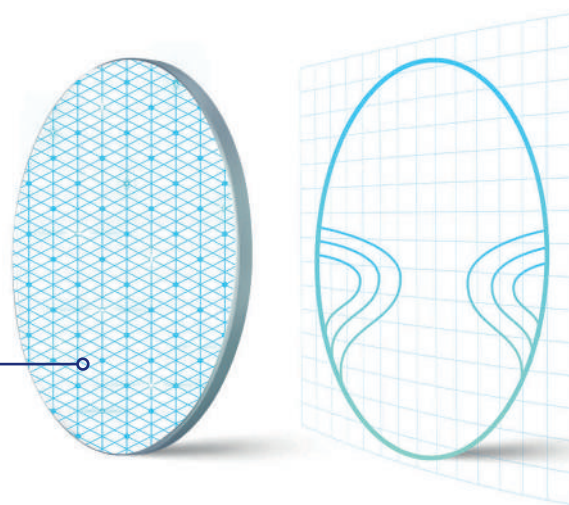


L'accommodation comme facteur clé

L'accommodation est la capacité naturelle du porteur à se focaliser à différentes distances sans bouger les yeux ni la tête, en stimulant ou en relaxant simplement le cristallin à l'intérieur de l'œil. IOT Digital Ray-Path 2 intègre ce facteur dans chaque verre et prend en compte l'espace objet accommodatif, le volume de points compris dans la plage de vision nette pour chaque direction de regard.


IOT Digital Ray-Path 2 travaille en synergie avec la nature. Une technologie qui utilise le pouvoir inné de l'œil humain pour perfectionner le processus d'optimisation des verres personnalisés.



Données

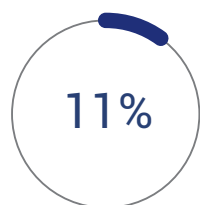

11% des **directions de regard** sont désormais optimisées dans les verres traditionnels.

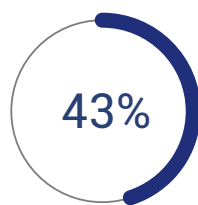

43% des **directions du regard** sont désormais optimisées dans les verres personnalisés.



99.5% des **directions du regard** sont désormais optimisées dans les verres intégrant IOT Digital Ray-Path 2.

Caractéristiques Principales



Personnalisation



Consistance



Optimisée dans l'espace objet accommodatif



Puissance compensée

Avantages:

- Large champ visuel
- Vision confortable et précise
- Meilleure expérience porteuse
- Élimination presque complète du flou périphérique
- Qualité visuelle supérieure lors de l'utilisation de dispositifs numériques

Méthodologie Steady:

Une grande avancée technologique dans les verres numériques free-form


La Méthodologie Steady constitue une percée technologique dans les verres numériques free-form en permettant le contrôle strict de la puissance moyenne, ce qui se traduit par des verres progressifs offrant des niveaux de satisfaction inégalés pour les porteurs.



Une nouvelle vision

En plus de contrôler la puissance cylindrique indésirable, la Méthodologie Steady traite les changements indésirables de la puissance moyenne dans les zones latérales du verre, offrant des verres progressifs supérieurs pour tous les modes de vie et segments de marché

La Méthodologie Steady contrôle soigneusement la puissance moyenne (équivalent sphérique) des verres progressifs. Elle réduit considérablement la puissance moyenne inutile dans la périphérie, en particulier des deux côtés de la croix d'ajustement.

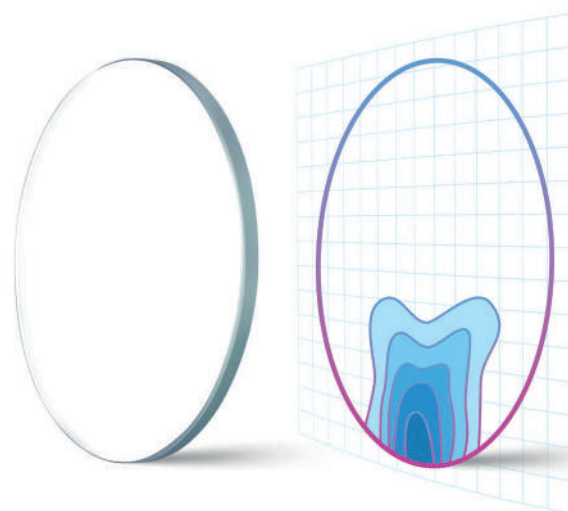

Adieu à l'effet de tangage. Bonjour à la stabilité


L'effet de tangage est une perception non stable de l'environnement qui cause de l'inconfort et réduit la satisfaction globale des verres, rendant l'adaptation plus difficile. Les verres conçus avec la Méthodologie Steady offrent aux porteurs une vision plus stable et naturelle.



Results



96% des porteurs ont apprécié une **excellente vision à distance**

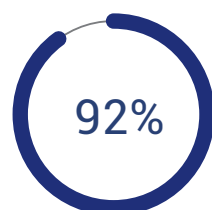

92% des porteurs ont éprouvé **un confort visuel amélioré**


Caractéristiques principales



Contrôle strict de la puissance moyenne dans la zone de vision de loin

Avantages:

- Stabilité d'image accrue pour réduire l'effet de tangage.
- Améliore l'acuité visuelle périphérique à distance.

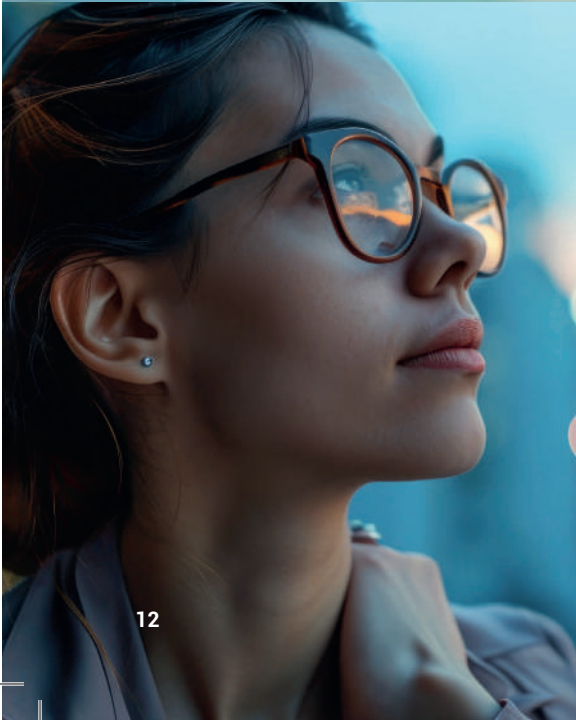

Notre catalogue des Design

PROGRESSIFS

Prestige Equilibre2

Verre progressif personnalisé free-form offrant une qualité visuelle sans précédent.

Prestige Expert2

Une vision intermédiaire excellente.

Prestige Horizon2

La vision de loin que vous allez redécouvrir

Prestige Lecture2

La vision de près que vous recherchez.

Prestige Flex

Le Verre Progressif HD Non Personnalisé pour Tous.

First OD HD

Verre Progressif entrée de gamme .

SPÉCIFIQUES

Prestige Drive

Votre verre progressif personnalisé pour une conduite sûre, même la nuit.

Reader 3

Votre vision intermédiaire et de près optimisée.

UNIFOCAUX

Unitek 2

Votre verre Unifocal personnalisé pour une clarté visuelle exceptionnelle

Relax


Profitez de la vie sans limite avec les verres Relax

Myoless

La solution parfaite pour ralentir définitivement la progression de la myopie chez les enfants.

Progressifs


Prestige Equilibre2

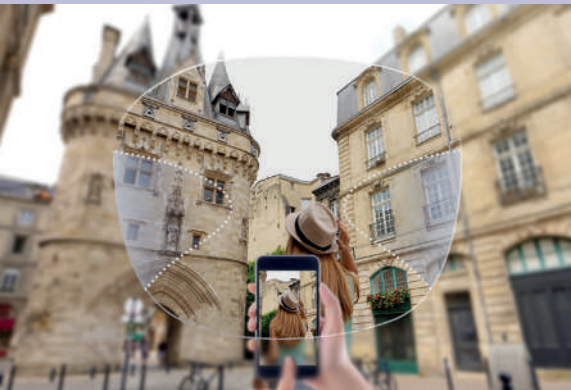

Verre progressif personnalisé free-form offrant une qualité visuelle sans précédent.




Prestige Expert2

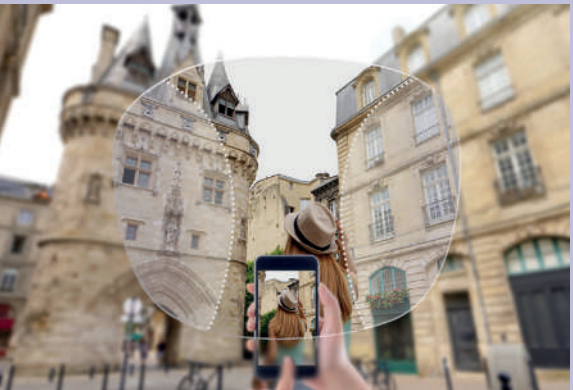

Une vision intermédiaire excellente.



Prestige Horizon2

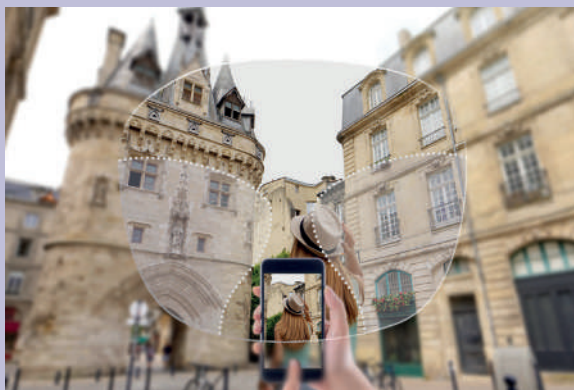

La vision de loin que vous allez redécouvrir

Prestige Lecture2



La vision de près que vous recherchez.



► PROGRESSIFS

Prestige Equilibre2

**Verre progressif personnalisé free-form
offrant une qualité visuelle sans précédent.**

Une fois levé, nous ne savons plus quand nous retournerons au lit. Notre quotidien est rempli d'activités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, nécessitant un verre de qualité, moderne et personnalisé, capable de répondre pleinement à notre rythme de vie actuel.

Grâce à des technologies de pointe, le verre Prestige Equilibre2 a non seulement révolutionné le concept de personnalisation en tenant compte de la capacité d'accommodation du porteur pour se focaliser à différentes distances, mais a également considérablement réduit l'effet de balancement causé par la distorsion latérale de l'image, ce qui se traduit par une qualité visuelle sans précédent et de vastes champs de vision à n'importe quelle distance.

CATÉGORIE

Utilisation —————► Générale

Produit —————► Personnalisé


Fréquence d'utilisation —► Régulière



PORTEUR IDÉAL

- Ceux qui ont besoin d'une meilleure qualité visuelle et de confort.
- Porteurs expérimentés ou novices dans l'utilisation de progressifs désirant de larges champs de vision à la fois de près et de loin.
- Porteurs avec toutes sortes de corrections et d'additions.

CARACTÉRISTIQUES

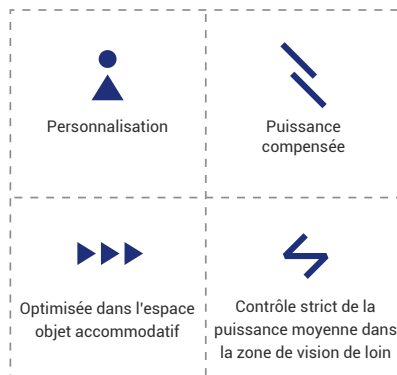


MFH [HAUTEUR DE MONTAGE]

14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm

TECHNOLOGIES

MÉTHODOLOGIE STEADY

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

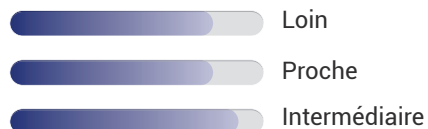

AVANTAGES

- Champs visuels larges et équilibrés **à toutes les distances.**
- Mise au point confortable et précise **pour toutes les distances de travail et dans toutes les directions du regard.**
- **Réduction du flou périphérique.**
- Grande stabilité d'image **en réduisant l'effet de balancement.**
- Excellente qualité visuelle lors de l'utilisation **de dispositifs numériques.**
- Verre **hautement personnalisé.**

► PROGRESSIFS

Prestige Expert2

Une vision intermédiaire excellente.

De nos jours, de nombreuses personnes ne se contentent pas seulement de profiter d'une vision intermédiaire fantastique, mais recherchent également un verre premium offrant une nouvelle expérience visuelle et des performances incroyables.

Dans le but de répondre aux besoins de ces porteurs, IOT a conçu Prestige Expert2. Un verre personnalisé Free-Form capable de satisfaire les demandes du plus grand nombre. Il offre une transition douce et simple entre la VL et la VP et il est doté d'un large champs intermédiaire. Avec notre dernière technologie, il offre une adaptation rapide et facile. De plus, il garantit une grande stabilité et une vision nette.

CATÉGORIE

Utilisation —————► Générale

Produit —————► Personnalisé


Fréquence d'utilisation —► Régulière



PORTEUR IDÉAL

- Personnes désirant profiter d'un verre offrant un confort et une qualité visuelle inégalés.
- Jeune porteur, patients en inadaptations et porteurs expérimentés de progressifs recherchant avant tout une incroyable vision intermédiaire.
- Porteurs avec tous types de corrections et d'additions.

CARACTÉRISTIQUES

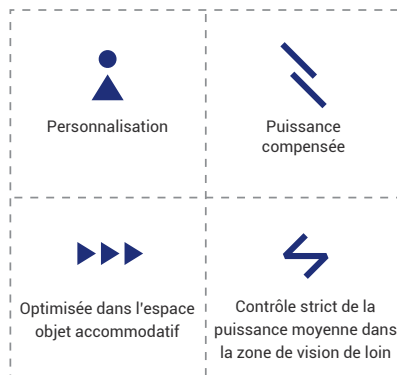



MFH [HAUTEUR DE MONTAGE]

14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm

TECHNOLOGIES

MÉTHODOLOGIE STEADY

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

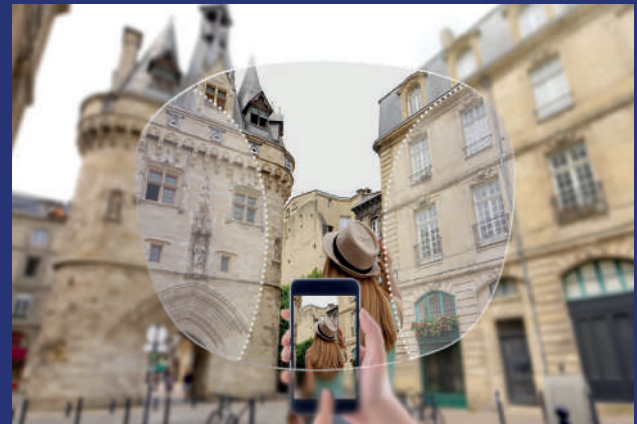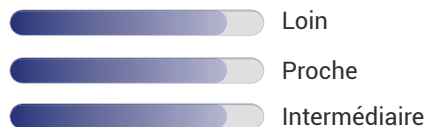

AVANTAGES

- Design très fluide.
- Large champ visuel en intermédiaire.
- Zone intermédiaire facile à trouver.
- Réduction du flou périphérique.
- Grande stabilité d'image en réduisant l'effet de balancement.
- Adaptation facile et rapide.
- Verre hautement personnalisé.

► PROGRESSIFS

Prestige Horizon2

La vision de loin que vous allez redécouvrir

Il existe de nombreux verres sur le marché qui offrent une vision de loin incroyable. Cependant, beaucoup d'entre eux ne parviennent pas à combler toutes les lacunes du porteur, ce qui les conduit à l'insatisfaction et à la frustration.

Prestige Horizon2 parvient à faire exactement le contraire. En plus d'une vision incroyable et panoramique de loin, ce verre progressif personnalisé free-form offre également un grand confort. Vous aurez une liberté totale en ce qui concerne le mouvement latéral des yeux dans le champs de vision de loin car la technologie qu'intègre ce verre permet de visualiser les objets avec une grande précision et clarté.

CATÉGORIE

Utilisation —————► Générale

Produit —————► Personnalisé

Fréquence d'utilisation —► Régulière

iot
lens design



PORTEUR IDÉAL

- Ceux qui considèrent très important d'avoir un verre premium offrant une qualité visuelle extraordinaire et un grand confort.
- Porteurs expérimentés ou novices dans l'utilisation de progressifs nécessitant un champ visuel plus large.
- Porteurs avec tous types de corrections et d'additions.

CARACTÉRISTIQUES



 Personnalisation	 Puissance compensée
 Optimisée dans l'espace objet accommodatif	 Contrôle strict de la puissance moyenne dans la zone de vision de loin

MFH [HAUTEUR DE MONTAGE]
14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm

TECHNOLOGIES

MÉTHODOLOGIE STEADY

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

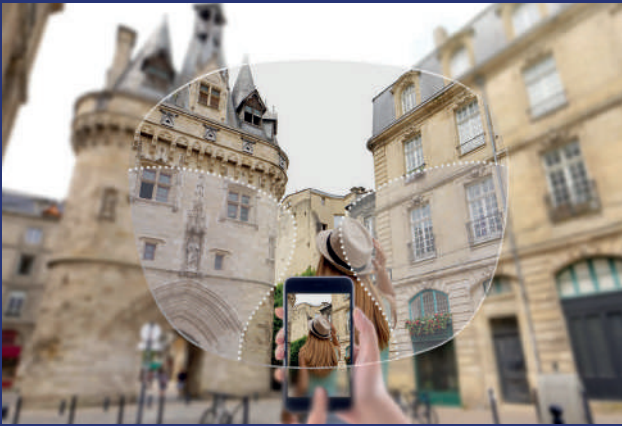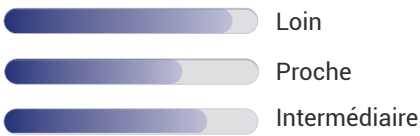

AVANTAGES

- Amélioration de la vision de loin.
- Large champ visuel de loin.
- Vision haute définition.
- Plus de confort lors de la réalisation d'activités nécessitant une vision de loin.
- Réduction du flou périphérique.
- Grande stabilité d'image en réduisant l'effet de balancement.
- Liberté dans le mouvement latéral des yeux de loin.
- Verre hautement personnalisé.

► PROGRESSIFS

Prestige Lecture2

La vision de près que vous recherchez.

Des actions telles que lire un livre, coudre, utiliser une tablette ou simplement nouer ses lacets ne sont que quelques exemples qui montrent l'importance et l'utilisation quotidienne de la vision de près. Cependant, il n'est pas un secret qu'actuellement, tous les yeux ne sont pas prêts pour cela.

Prestige Lecture2 est un verre progressif personnalisé free-form optimisé principalement pour offrir non seulement une vision de près large et extraordinaire, mais aussi un grand confort, une performance spectaculaire et bien plus encore. De plus, grâce aux technologies qu'il intègre, la personnalisation et la stabilité de l'image sont absolument garanties.

CATÉGORIE

Utilisation —————► Générale

Produit —————► Personnalisé

Fréquence d'utilisation —► Régulière



PORTEUR IDÉAL

- Ceux qui recherchent un verre supérieur et apprécient également des aspects tels que la qualité visuelle et le confort.
- Porteurs expérimentés et novices dans l'utilisation de progressifs qui recherchent une bonne vision de près.
- Porteurs avec tous types de corrections et d'additions.

CARACTÉRISTIQUES

 Personnalisation	 Puissance compensée
 Optimisée dans l'espace objet accommodatif	 Contrôle strict de la puissance moyenne dans la zone de vision de loin



MFH [HAUTEUR DE MONTAGE]

14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm

TECHNOLOGIES

MÉTHODOLOGIE STEADY

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

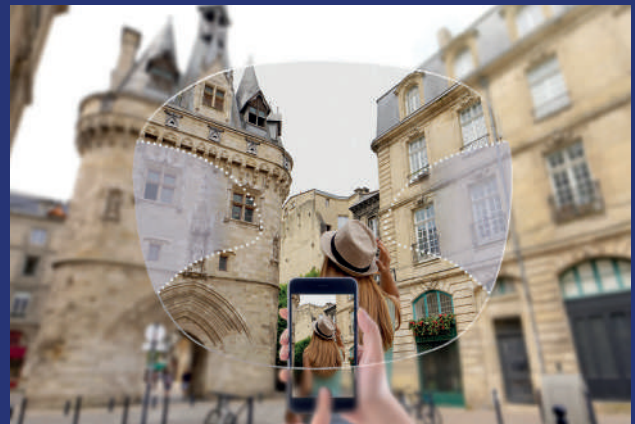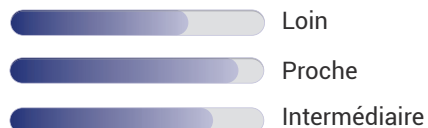

AVANTAGES

- Large champ visuel de près.
- Zone de près facile à trouver.
- Plus de confort lors de la réalisation d'activités nécessitant une vision de près.
- Réduction du flou périphérique.
- Grande stabilité d'image en réduisant l'effet de balancement.
- Verre hautement personnalisé.

► PROGRESSIFS

Prestige Flex

Le Verre Progressif HD Non Personnalisé pour Tous.

Prestige Flex est un verre progressif FreeForm non compensé qui garantit une vision claire à un excellent rapport qualité-prix. Adapté à tous les porteurs de lunettes progressifs, il incarne la synthèse de notre expertise. Simple pour l'opticien et pour le porteur : aucune mesure nécessaire, mais des résultats fidèles aux attentes des presbytes.

CATÉGORIE

Utilisation —————► Générale

Produit —————► Non Personnalisé

Fréquence d'utilisation —► Régulière



PORTEUR IDÉAL

- Idéal pour les porteurs à la recherche d'une solution progressive non personnalisée de haute définition.
- Convient à ceux qui apprécient un bon rapport qualité-prix sans compromettre la qualité visuelle.
- Parfait pour les personnes recherchant une expérience visuelle claire et confortable sans avoir besoin de mesures spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES

	
Verre progressif FreeForm généraliste HD non personnalisé, adapté à tous les porteurs de lunettes progressifs.	Conception simplifiée pour une utilisation facile tant pour l'opticien que pour le porteur.
	
Technologie progressive de haute définition offrant une vision claire et précise à toutes les distances.	Rapport qualité-prix avantageux, offrant une solution économique sans compromettre la qualité visuelle.

MFH [HAUTEUR DE MONTAGE]

16mm | 18mm

-  Loin
-  Proche
-  Intermédiaire



AVANTAGES

- Offre une vision claire et nette grâce à sa technologie progressive FreeForm de haute définition.
- Prix abordable, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une expérience visuelle de qualité à moindre coût.
- Facilité d'utilisation pour l'opticien et le porteur, sans nécessité de mesures spécifiques, tout en garantissant des résultats fidèles aux attentes des porteurs de lunettes presbytes.

► PROGRESSIFS

First OD HD

Verre Progressif entrée de gamme

First OD HD est un verre progressif FreeForm non compensé, spécialement conçu pour les porteurs recherchant une solution économique offrant un excellent rapport qualité-prix, notamment adaptée aux grandes montures de lunettes.

CATÉGORIE

Utilisation —————> Générale

Produit —————> Non Personnalisé

Fréquence d'utilisation —> Régulière



PORTEUR IDÉAL

- Idéal pour les porteurs de lunettes à la recherche d'une solution progressive d'entrée de gamme offrant un excellent rapport qualité-prix.
- Convient particulièrement aux personnes recherchant une vision claire et confortable sans compromettre leur budget.

CARACTÉRISTIQUES



Verre progressif FreeForm d'entrée de gamme, non compensé, adapté aux porteurs de grandes montures.



Offre une vision claire et confortable à toutes les distances, sans compromis sur la qualité.



Conception spécialement pensée pour réduire les distorsions et les aberrations visuelles, assurant ainsi une expérience visuelle agréable.



Excellente solution pour ceux qui recherchent un verre progressif abordable sans sacrifier la qualité et le confort.

MFH [HAUTEUR DE MONTAGE]

20mm



Loin



Proche



Intermédiaire



AVANTAGES

- Prix abordable, en faisant une option attrayante pour ceux qui recherchent un verre progressif de qualité à moindre coût.
- Facile à adapter pour les opticiens, offrant ainsi une expérience de port confortable et précise pour les porteurs.



**Notre
catalogue des
Design Spécifique
et Mi-Distance**

Verres spécifiques

Prestige Drive




Votre verre progressif personnalisé pour une conduite sûre, même la nuit.



Mi-Distance

Reader 3

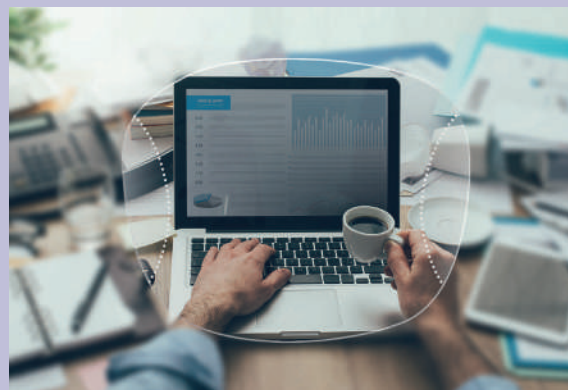

Votre vision intermédiaire et de près optimisée.



Prestige Drive

Votre verre progressif personnalisé pour une conduite sûre, même la nuit

Prestige Drive est un verre progressif personnalisé free-form spécialement conçue pour les conducteurs en incluant une zone de vision nocturne. La conduite est l'une de ces activités que nous réalisons assez régulièrement, ce qui pousse de nombreux conducteurs à rechercher un verre leur permettant de conduire en toute liberté et sécurité. Contrairement à certain verre progressif standard, la verre Prestige Drive est idéale pour la conduite. Cela est dû à sa distribution de puissance spécifiquement adaptée à cet usage.

De plus, la zone de vision nocturne de cette conception compense la différence de réfraction qui se produit entre le jour et la nuit, offrant ainsi une meilleure acuité visuelle et réduisant la fatigue visuelle de l'porteur.

CATÉGORIE

Usage —————> Spécial

Produit —————> Personnalisé

Fréquence d'utilisation —> Générale



PORTEUR IDÉAL

- Conducteurs à la recherche du verre le plus innovant.
- Porteurs cherchant confort, qualité visuelle et sécurité pendant la conduite.
- Porteurs qui ressentent une moins bonne vision la nuit que le jour.
- Porteurs avec tout type de prescriptions et additions.

CARACTÉRISTIQUES

 Personnalisation	 Puissance compensée	 Optimisation dans l'espace d'accommodation de l'objet
---	--	--

MFH [HAUTEUR DE MONTAGE]

18mm

TECHNOLOGIES

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

	Loin
	Proche
	Intermédiaire



AVANTAGES

- Améliorent l'expérience visuelle lors de la conduite dans des conditions diurnes et nocturnes variées.
- Compensent les effets de la myopie nocturne grâce à des zones de vision uniques permettant une meilleure focalisation.
- Meilleure vision du tableau de bord et des rétroviseurs.
- Réduisent la fatigue visuelle pendant la conduite nocturne.

Reader 3

Votre vision intermédiaire et de près optimisée

Reader 3 est un verre personnalisé free-form offrant d'excellentes performances en vision intermédiaire et de près. Nous travaillons, mais pas comme avant... Le télétravail est désormais plus courant que jamais, ce qui conduit de plus en plus de professionnels presbytes (comme les enseignants, les programmeurs, les architectes, etc.) à passer une grande partie de leur temps à utiliser leur vision intermédiaire et de près. Une nouvelle façon de travailler nécessite une nouvelle façon de voir.

C'est pourquoi nous avons Reader 3, un verre spécialement conçu pour répondre aux besoins visuels de ce type de porteur. Il offre en même temps la meilleure qualité visuelle aux deux distances, transformant ainsi cette nouvelle façon de travailler en une expérience agréable et sûre.

CATÉGORIE

Usage —————> Spécial

Produit —————> Personnalisé

Fréquence d'utilisation —> Occasionnelle

iot
lens design



PORTEUR IDÉAL

- Ceux qui passent de longues périodes à utiliser leur vision de près et intermédiaire.
- Nouveaux presbytes.
- Ceux qui travaillent à distance.
- Porteurs avec tous types de corrections et d'additions.
- Ne conduisez pas tout en utilisant les verres Reader 3.


CARACTÉRISTIQUES

 Personnalisation	 Puissance compensée	 Optimisation dans l'espace d'accommodation de l'objet
---	--	--

MFH [HAUTEUR DE MONTAGE]
18mm

TECHNOLOGIES

IOT DIGITAL RAY-PATH 2

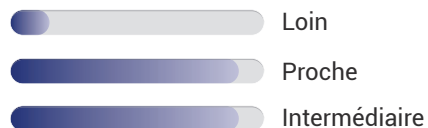

AVANTAGES

- Large champ visuel en vision de près et intermédiaire.
- Meilleure ergonomie posturale, évitant les mouvements de tête inutiles.
- Excellente qualité visuelle et mise au point confortable et précise, surtout lors de l'utilisation d'appareils électroniques.
- Vision dynamique ; transition douce entre les différentes zones de vision.
- Adaptation rapide.
- Élimination du flou périphérique.
- Meilleure acuité visuelle pour une mise au point plus confortable et précise et un mouvement oculaire plus agile.



Notre catalogue des verres

UNIFOCAUX



Unifocaux

Unitek 2



Votre verre Unifocal personnalisé pour une clarté visuelle exceptionnelle.

Relax



Profitez de la vie sans limite avec les verres Relax.

► UNIFOCALUX

Unitek 2

Votre verre Unifocal personnalisé pour une clarté visuelle exceptionnelle

Unitek 2 est un verre Unifocal personnalisé free-form qui, grâce à sa conception de dernière génération, offre une qualité visuelle inégalée.

Nous sommes jeunes. En d'autres termes, nous sommes des personnes modernes, rebelles, courageuses et digitales qui veulent conquérir le monde. C'est pourquoi nous avons besoin d'un verre qui soit prêt à tout.

Unitek 2 est parfait pour profiter de notre quotidien car il ont été spécifiquement conçues pour les modes de vie modernes. En effet, leur qualité visuelle, leur clarté et leur confort, ainsi que leurs technologies de pointe, en font les meilleurs alliés des jeunes actifs.

CATÉGORIE

Usage —————► Général

Produit —————► Personnalisé

Fréquence d'utilisation —► Régulière



PORTEUR IDÉAL

- Porteurs à la recherche du verre la plus innovante.
- Porteurs actifs effectuant régulièrement des tâches visuellement exigeantes.
- Porteurs constamment connectés au monde digital.
- Porteurs avec tous types de corrections.

CARACTÉRISTIQUES

 Personnalisation	 Puissance compensée
 Optimisation dans l'espace d'accommodation de l'objet	 Consistance

MFH [HAUTEUR DE MONTAGE]
18mm

TECHNOLOGIES

IOT DIGITAL RAY-PATH 2



AVANTAGES

- Qualité visuelle incroyable, particulièrement lors de l'utilisation de dispositifs digitaux et pour des corrections élevées et des montures incurvées.
- Mise au point confortable et précise à toutes les distances.
- Élimination presque complète du flou périphérique.

► UNIFOCALUX

Relax

Profitez de la vie sans limite avec les verres Relax

Relax est un verre Unifocal antifatigue personnalisé free-form qui nous permet de profiter de notre vie sans limites.

Nous vivons actuellement la quatrième révolution industrielle, une révolution caractérisée par la présence de la technologie et du numérique dans pratiquement tous les aspects de notre vie. A tel point que nous sommes constamment connectés à différents appareils électroniques et, par conséquent, nous focalisons sur plusieurs écrans à la fois. Un mode de vie digital et technologique comme celui-ci nécessite des yeux sains et forts.

Les verres Relax ont été développées non seulement pour protéger nos yeux, mais aussi pour soulager les symptômes de la fatigue visuelle associés à une utilisation continue d'appareils électroniques. Elles intègrent même une légère augmentation de la puissance en vision de près qui peut être personnalisée pour chaque patient, faisant des verres Relax le meilleur choix pour affronter le monde digital actuel.

CATÉGORIE

Usage —————► Général

Produit —————► Personnalisé

Fréquence d'utilisation —► Régulière



PORTEUR IDÉAL

- Personnes ayant besoin d'une solution originale.
- Patients souffrant de symptômes de fatigue visuelle.
- Pré-presbytes.
- Porteurs constamment connectés au monde digital.
- Porteurs avec tous types de corrections.

CARACTÉRISTIQUES

 Personnalisation	 Puissance compensée
 Optimisation dans l'espace d'accommodation de l'objet	 Consistance

MFH [HAUTEUR DE MONTAGE]
18mm

TECHNOLOGIES

IOT DIGITAL RAY-PATH 2



AVANTAGES

- Qualité visuelle incroyable, même lors de l'utilisation de dispositifs numériques.
- Vision plus détendue nécessitant moins d'effort d'accommodation.
- Meilleure vitesse de lecture sur les dispositifs numériques.
- Mise au point confortable et précise à toutes les distances.
- Élimination presque complète du flou périphérique.



Notre catalogue des verres

CONTRÔLE DE LA MYOPIE



Contrôle de la myopie

Myoless



La solution optique pour réduire la progression de la myopie chez les enfants.

Myoless

La solution parfaite pour ralentir définitivement la progression de la myopie chez les enfants.

Myoless est une solution optique innovante et à la pointe de la technologie pour gérer la myopie infantile comme aucune autre.

S'appuyant sur des recherches approfondies, Myoless est non seulement extrêmement efficace pour ralentir le taux d'augmentation de la myopie ; il combat également l'allongement oculaire grâce à sa technologie unique et révolutionnaire, qui s'adapte à l'asymétrie nasale et temporelle de la rétine.

CATÉGORIE

Usage —————> Général

Produit —————> Gestion de la myopie

Fréquence d'utilisation —> Régulière



PORTEUR IDÉAL

- Enfants avec une erreur réfractive de -0,50D à -1,00D
- Enfants âgés d'au moins 6 ans

SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ

L'efficacité de Myoless a été évaluée dans la première étude randomisée en double aveugle réalisée spécifiquement dans une population européenne. Des enfants âgés de 6 à 14 ans ont participé, le traitement se poursuivant pendant un an.

L'étude a donné des résultats préliminaires remarquables. L'allongement oculaire, mesuré par l'augmentation de la longueur axiale, était 39 % plus faible après 12 mois chez les porteurs de ce verre par rapport à un verre à vision unique standard.

Elle a également obtenu des taux de satisfaction élevés pour des variables telles que la vision de près, de loin et intermédiaire, le confort et la netteté, offrant aux enfants une expérience visuelle vraiment confortable et sûre.



AVANTAGES

- Ralentissement de la progression de la myopie infantile : réduit la croissance de l'allongement de l'œil
- Vision parfaite dans la zone de vision claire
- Confort accru : similaire à une verre SV régulière
- Esthétique supérieure : le traitement est indétectable en surface de la verre, sans marques ou lignes visibles

**Notre
catalogue des
traitements**

DUR: Le traitement durci pour vos lunettes: protection contre les rayures et longévité accrue



POURQUOI CHOISIR LE TRAITEMENT DURCI?

- **Résistance accrue aux rayures:** Le traitement durci offre une protection efficace contre les rayures causées par des éléments tels que les clés, les bijoux, les doigts et les surfaces rugueuses. Cela permet de préserver la clarté optique de vos verres et de leur donner une apparence neuve plus longtemps.
- **Longévité accrue des verres:** En protégeant vos verres contre les rayures, le traitement durci prolonge considérablement leur durée de vie. Vous réduisez ainsi le risque de devoir les remplacer prématurément, ce qui vous permet d'économiser de l'argent.
- **Particulièrement important pour les verres organiques:** Les verres organiques, plus légers et plus résistants aux chocs que les verres minéraux, sont également plus sensibles aux rayures. Le traitement durci est donc particulièrement recommandé pour ce type de verres.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE TRAITEMENT DURCI :

- **Application:** Le traitement durci est généralement appliqué sur les verres organiques lors du processus de fabrication.
- **Couplé à d'autres traitements:** Le traitement durci est souvent associé à d'autres traitements pour les verres de lunettes, tels que l'antireflet, les verres teintés ou les verres polarisés.

FAIRE TABLEAU DE COMPARAISON	DUR	ARM	ARH
 RAYURES	✓	✓	✓
 REFLETS		✓	✓
 EAU		✓	✓
 SALISSURES			✓

ARM: Des verres traités antireflet



Optez pour des verres traités antireflet et profitez d'une vision plus agréable au quotidien.

CE TRAITEMENT BASIQUE OFFRE PLUSIEURS AVANTAGES :

- **Réduction des reflets gênants:** Réduction importante des reflets parasites, pour une vision plus nette et plus précise.
- **Meilleure transparence qu'un verre Durci:** Les verres traités antireflet laissent passer davantage de lumière, pour une vision plus naturelle et plus lumineuse.
- **Hydrophobe:** Plus facile à nettoyer

Un choix économique pour une vision plus confortable

Si vous recherchez un traitement simple et efficace pour améliorer votre confort visuel, les verres traités antireflet basiques sont une solution intéressante. Ils offrent un bon rapport qualité-prix et vous permettent de profiter d'une vision plus agréable au quotidien.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

- Les verres traités antireflet basiques sont disponibles uniquement sur les produits Rac0

ARH: Une vision d'exception, sans compromis



Découvrez le traitement ARH, une technologie révolutionnaire qui propulse vos verres de lunettes vers de nouveaux sommets d'excellence.

ARH est un traitement super-antireflet; super-hydrophobe et antistatique qui offre une protection et un confort visuel inégalés, pour une expérience visuelle d'une qualité exceptionnelle.


ARH: Un choix incontournable pour une vision d'exception

Que vous soyez un professionnel exigeant, un amateur de loisirs en plein air ou simplement soucieux de votre confort visuel au quotidien, le traitement ARH est la solution idéale pour vous.

OPTEZ POUR UNE VISION PARFAITE EN TOUTES CIRCONSTANCES:

- **Résistance aux rayures doublée:** Dites adieu aux rayures disgracieuses et profitez de verres nets et éclatants plus longtemps.
- **Élimination quasi totale des reflets:** Profitez d'une vision claire et précise, même en présence de lumières artificielles ou d'écrans.
- **Propriétés anti-salissures renforcées:** Vos verres restent propres plus longtemps et se nettoient facilement avec un chiffon doux.
- **Super Hydrophobe:** L'eau glisse sur les verres, facilitant leur nettoyage et les protégeant des taches.
- **Super Oléophobe:** Les traces de doigts disparaissent facilement.
- **Réduction de la fatigue visuelle:** Réduisez la fatigue oculaire en réduisant les reflets parasites du quotidien.

Prise de mesure **pour tous les Verres***

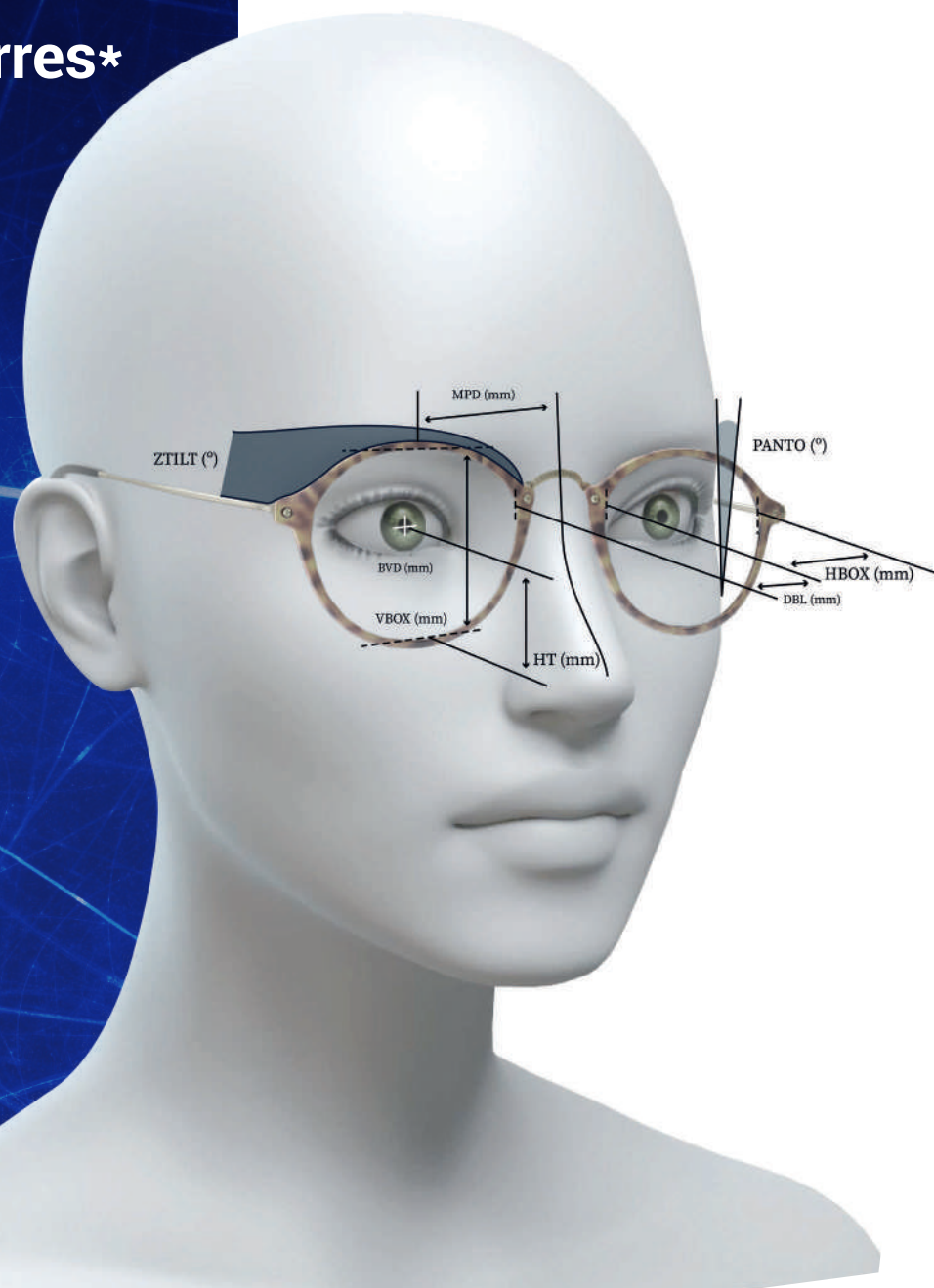


*Verre DIGITAL RAY-PATH




Prescription et addition

Digital Ray-Path® calcule la puissance que le porteur percevra réellement lorsque les verres seront mis sur la monture.

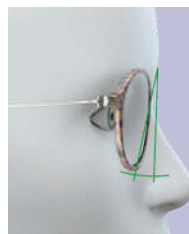


Angle pantoscopique

Angle entre le plan vertical de l'axe optique d'un verre de lunette et l'axe visuel de l'œil.

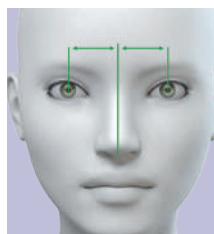


Écart pupilaire

Mesure entre l'arrête nasale et le centre de la pupille.

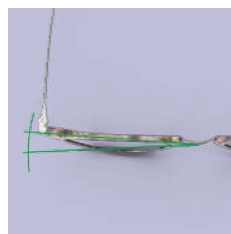


Angle de galbe

Angle de courbure de la monture.

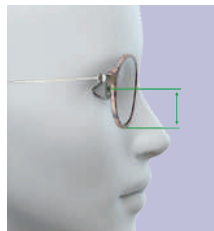


Hauteur de la pupille

Distance verticale entre le centre de la pupille et le bord inférieur de la monture boxing.

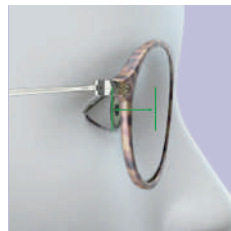


Distance Verre-œil

Distance entre la cornée et la face arrière du verre.

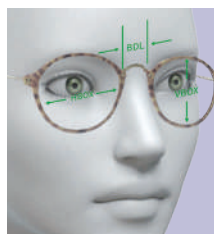

Côte de la monture

Les dimensions de la monture sont utilisées pour calculer le diamètre final; l'épaisseur du verre et améliorer l'optimisation.

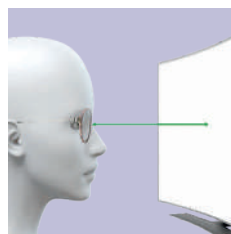

Distance de travail de près

Distance entre le verre et la position de lecture naturelle du porteur.

Les paramètres de personnalisation utilisés pour le calcul sont spécifiques à chaque porteur individuellement. Ces paramètres représentent l'identité de chacun et permettent la réalisation d'un verre unique personnalisé.

PUISSANCE COMPENSÉE

Verres Progressifs et Unifocaux


POURQUOI RECOMMANDER DES VERRES COMPENSÉS?

Les verres Digital Ray-Path® sont des verres compensés qui se calculent et s'optimisent pour chaque porteur en fonction des paramètres de ports. C'est l'un des principaux avantages qu'offre la technologie digitale. Pour chaque prescription, base du verre et indice de réfraction, le verre Digital Ray Path® offre au porteur une vision en haute définition ainsi qu'un champ visuel plus large.

BENEFICES DU VERRES COMPENSÉS POUR LE PORTEUR

VERRE UNIFOCAL CONVENTIONNEL +2.00 D


Effet de l'aberration oblique:

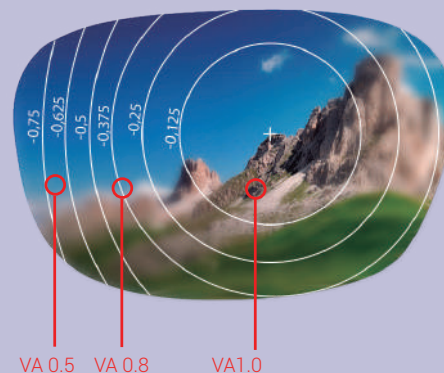

- Vision nette uniquement au centre.
- Champs visuel réduit.
- L'acuité visuelle décroît vers les bords.

VERRE UNIFOCAL COMPENSÉ +2.00 D

Effet de la puissance compensée:

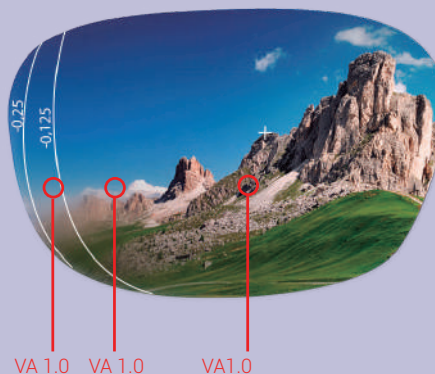

- Vision nette sur toute la surface du verre.
- Champs visuel large.
- L'acuité visuelle se maintient sur tout le champ.


COMMENT SE CALCULE LA PUISSANCE D'UN VERRE CONVENTIONNEL

La puissance du verre conventionnel se calcule en assumant que la lumière suit toujours un chemin perpendiculaire à la face postérieure. Quand le porteur regarde au centre du verre, la puissance est correcte et la qualité de vision est bonne. Par contre, lorsque le porteur regarde sur les côtés, les rayons de lumières ne traversant pas le verre de façon perpendiculairement mais oblique, le calcul de la puissance est alors incorrect.

COMMENT SE CALCULE LA PUISSANCE SUR UN VERRE COMPENSÉ


La technologie Digital Ray-Path® simule la position réelle du verre par rapport à l'oeil, en tenant compte tous les paramètres réels de personnalisation (ou standard s'ils ne sont pas disponibles). Par la suite, on simule la rotation de l'oeil et l'on étudie toutes les directions possible du regard à différentes distances. Finalement, la puissance du verre se modifie sur la face postérieure point par point pour compenser les aberrations obliques étudiées auparavant.

VERRE CONVENTIONNEL

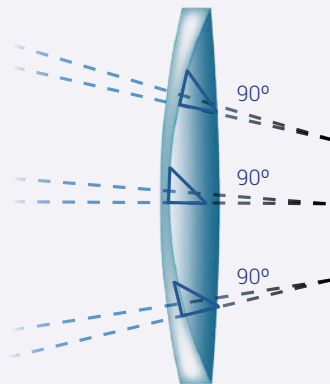

- Puissance non compensé
- Puissance du verre = graduation du patient
- Les aberrations obliques font que le patient perçoit une puissance différente à la sienne, ce qui réduit son acuité visuelle.

VERRE COMPENSÉ

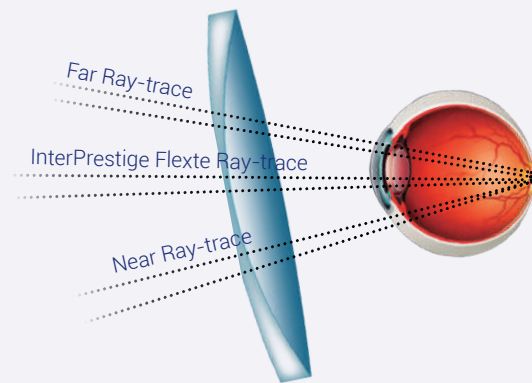

- On considère le système réel oeil-verre
- Puissance du verre = Puissance compensée
- Minimisation des aberrations obliques. Le patient percevra sa correction exacte lorsqu'il regardera au travers du verre.

GUIDE PRATIQUE DE **PRISE DE MESURES**


Prise de mesures avant de commander les verres

Pour garantir une correcte adaptation des verres, aussi bien progressifs qu'unifocaux, une prise de mesures précise est essentielle (écart et hauteur pupillaire, mesure de la monture).




ÉTAPE N° 1: Ajuster la Monture

- Ajustez les plaquettes de la monture jusqu'à ce que celle-ci soit confortable pour le porteur. Si la monture n'a pas de plaquettes assurez-vous que le pont repose correctement.
- Vérifiez que la longueur des branches est correcte et ajuster les manchons pour que la monture ne glisse pas.
- Finalement, assurez-vous que la monture soit totalement horizontale au visage du porteur. Sinon réglez-la pour qu'elle soit droite.

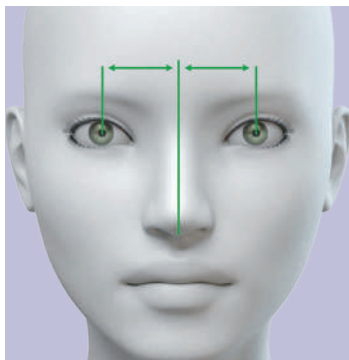

ÉTAPE N° 2: Écart Pupillaire

- Utilisez la règle prévue à cet effet afin de mesurer l'écart pupillaire ou un pupillomètre.
- Mesurez l'écart pupillaire et non interpupillaire de chaque oeil séparément.
- Vérifiez la mesure une deuxième fois pour être sûr.

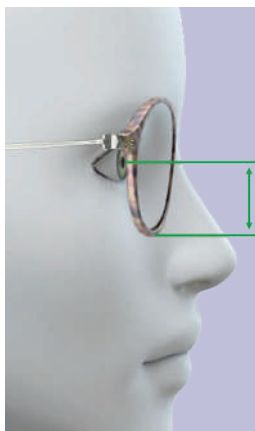

ÉTAPE N° 3: Hauteur Pupillaire

- Le porteur doit être en position naturelle. Vous devez vous situer à la même hauteur, vos yeux doivent être parfaitement en ligne avec les siens.
- Demandez au porteur de regarder votre oeil droit et marquez au marqueur permanent, le centre de la pupille gauche sur le verre. Après, demandez-lui de regarder votre oeil gauche et répéter la même opération avec sa pupille droite. Répéter le procédé deux fois pour vous assurer que le marquage est correct.
- La hauteur de la pupille de chaque oeil est la distance entre la marque réalisée au marqueur et le bord inférieur de la monture. Si la hauteur de chaque pupille varie plus d'un millimètre tenez en compte lors de la commande et montage des verres.

VÉRIFICATIONS LORS DE LA LIVRAISON

Lors de la livraison des lunettes au futur porteur, il est important de vérifier que la croix de centrage est parfaitement en ligne avec la pupille aussi bien pour les unifocaux que pour les verres progressifs. Il est recommandable de ne pas effacer les tampons jusqu'à ce que vous ayez vérifié que le montage est correct au moment de la livraison.

ÉTAPE N°1: Réajuster la Monture

- Après le montage, la monture a pu se désajuster. Ajustez à nouveau la monture pour que le port soit confortable. Vérifiez aussi que la monture est droite.
- Vérifiez que les deux verres ont été montés sans être tournés. Si l'un des verres a bougé ne serait-ce qu'un peu lors du montage, il peut entraîner une inadaptation.
- Vérifiez, pour chaque oeil, que la croix de centrage est parfaitement au centre de la pupille du porteur. Une petite erreur verticale ou horizontale peut entraîner une gêne voire même la perte de la qualité visuelle. S'il s'agit d'une erreur de montage horizontale, vérifiez l'écart pupillaire et commandez le verre de nouveau
- Si le montage est correct, effacez les marques et remettez la monture au client.
- Demandez au porteur de regarder au loin afin qu'il vérifie qu'il est confortable avec ses nouveaux verres
- Dans le cas de verres progressifs, à l'aide d'une carte de lecture, vérifiez que le porteur situe facilement la zone de lecture.



Il est recommandable de vérifier le montage des verres avant de les remettre au porteur.

Montage correct

La croix de montage correspond avec le centre de la pupille.



Montage incorrect

La croix de montage ne correspond pas avec le centre de la pupille.



Marquages





Prestige Equilibre2

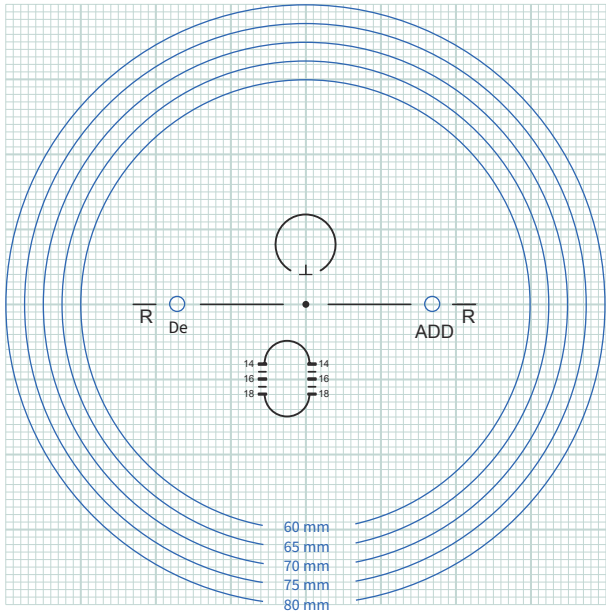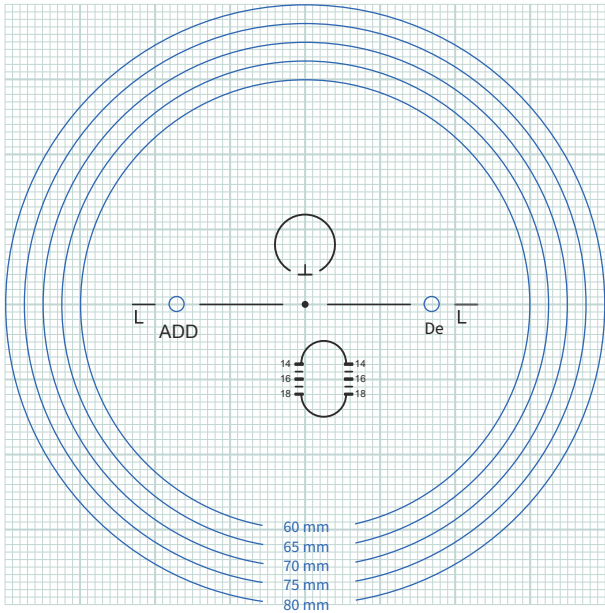



Prestige Expert2

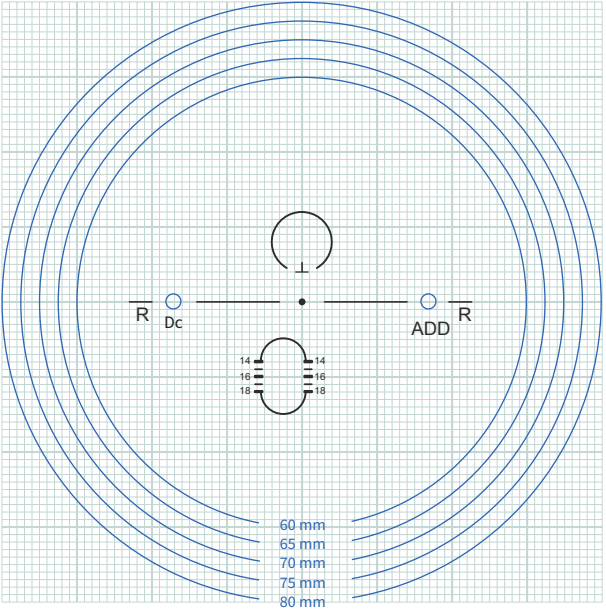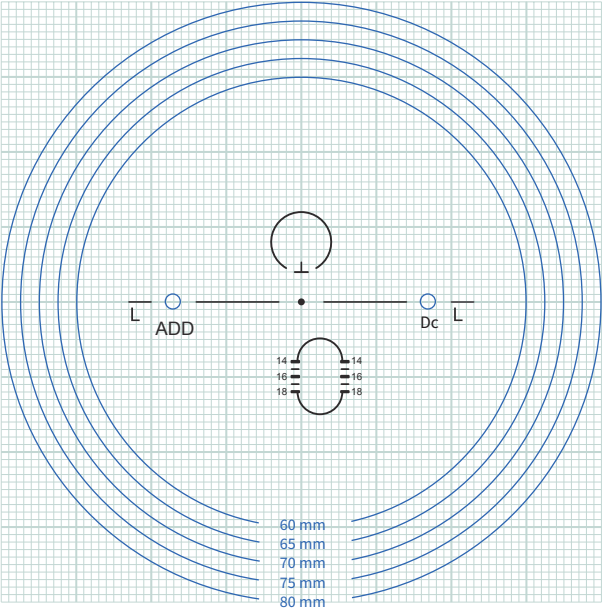

Prestige Horizon2

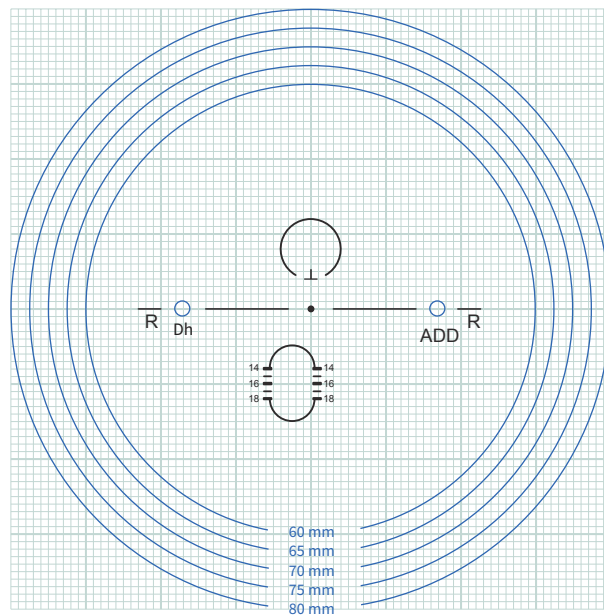
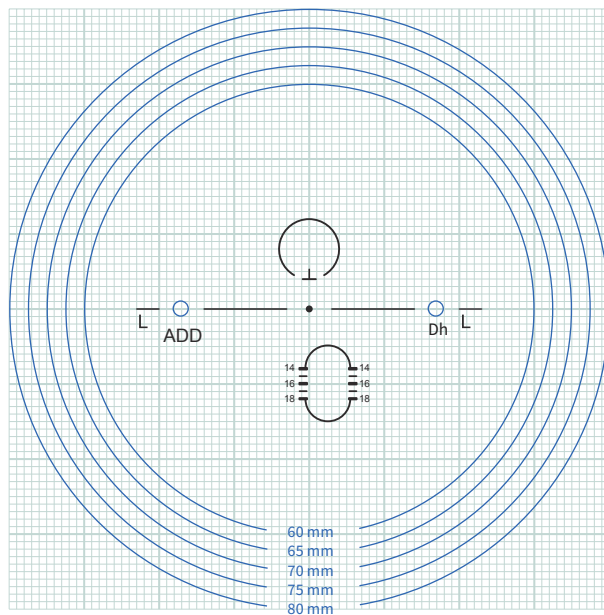


Prestige Lecture2

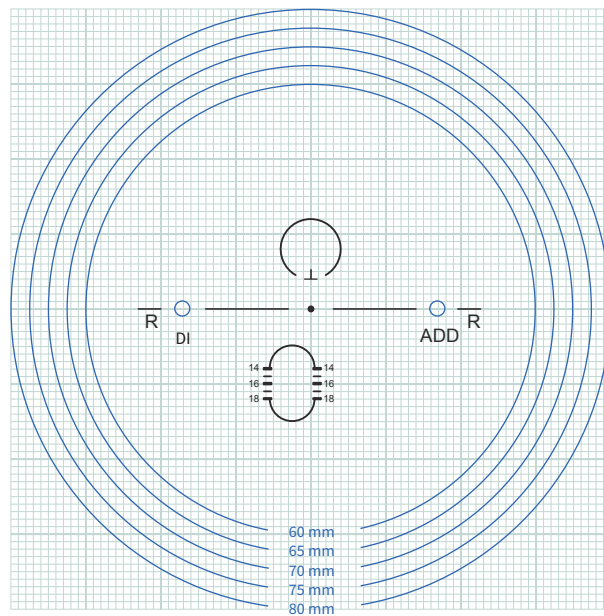
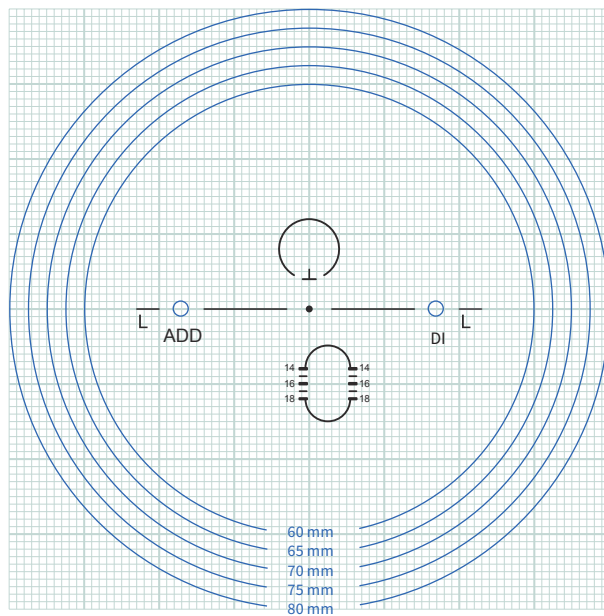


PROGRESSIFS

Prestige Flex

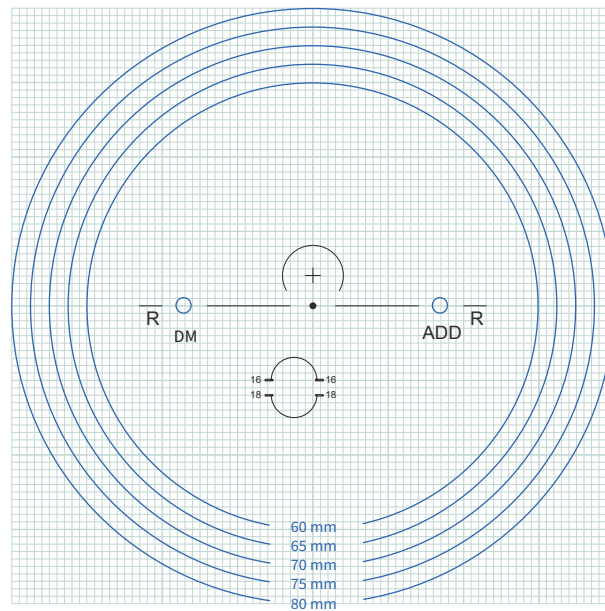
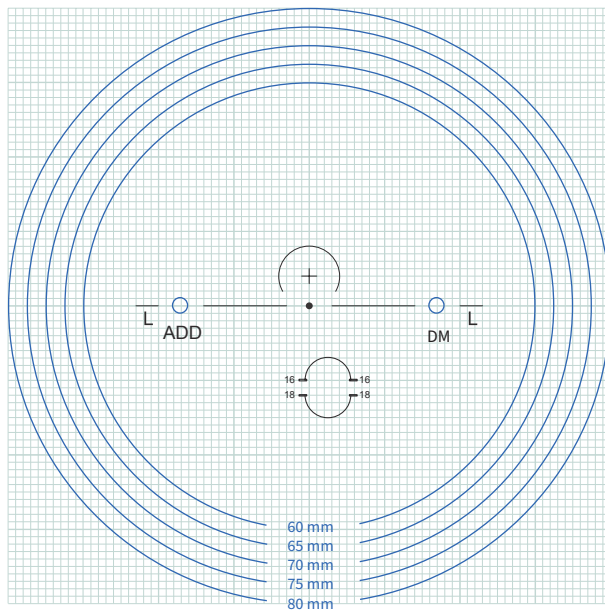


First OD HD

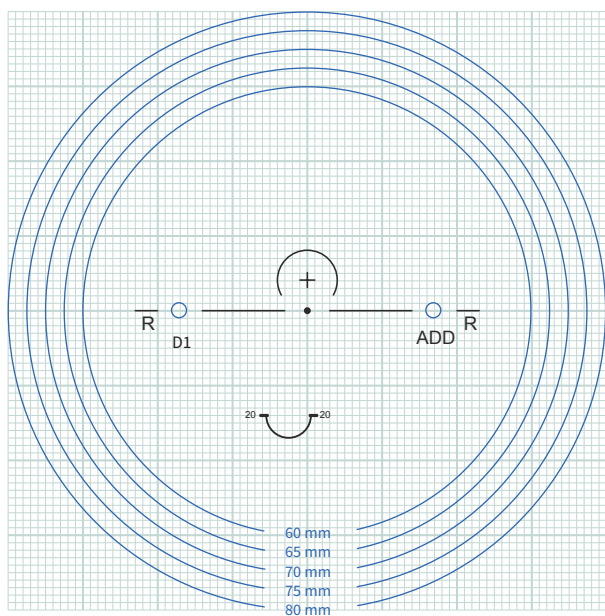
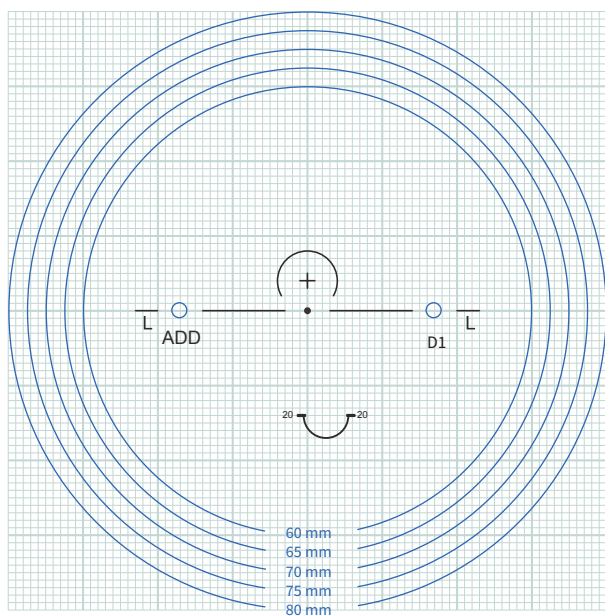






Prestige Drive

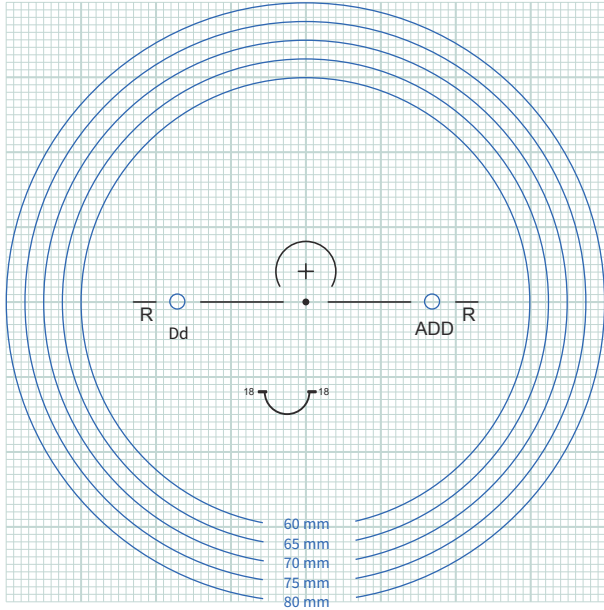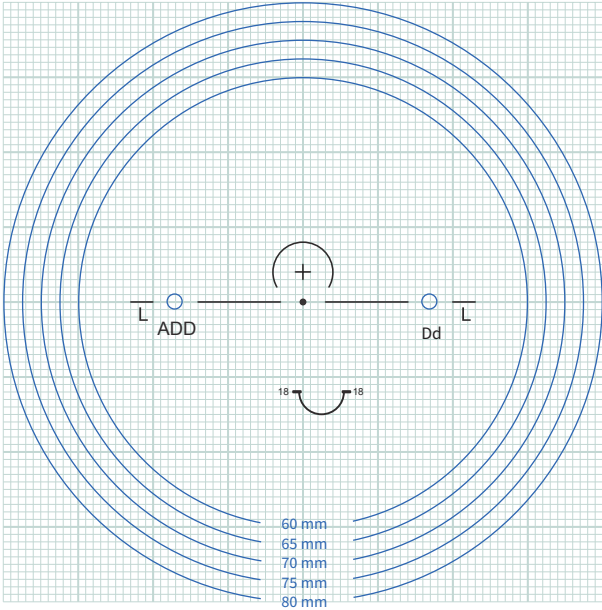



Reader 3

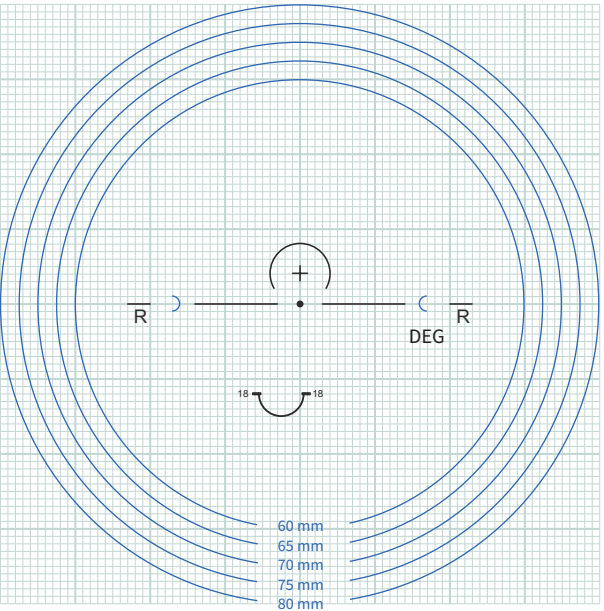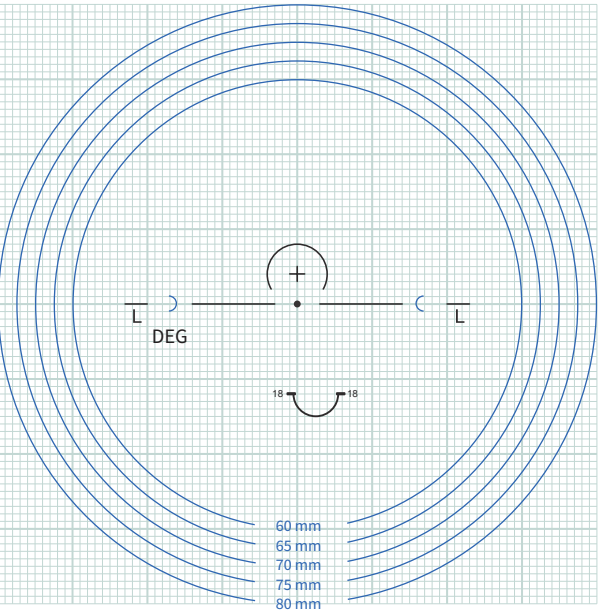



Unitek 2

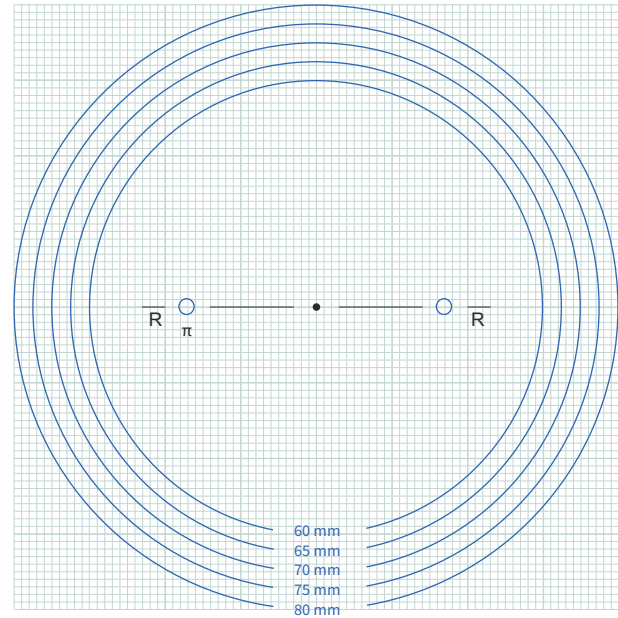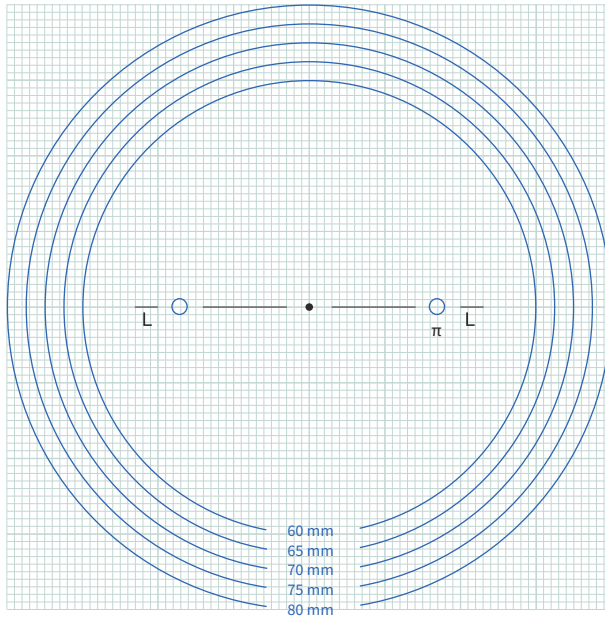

Relax

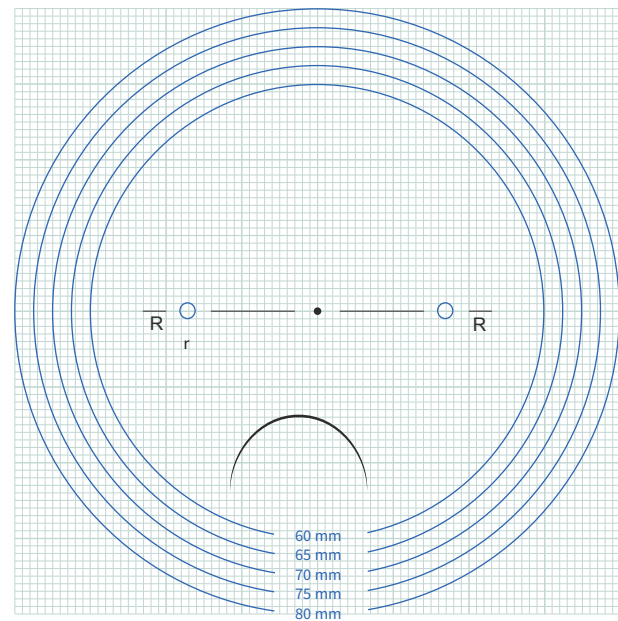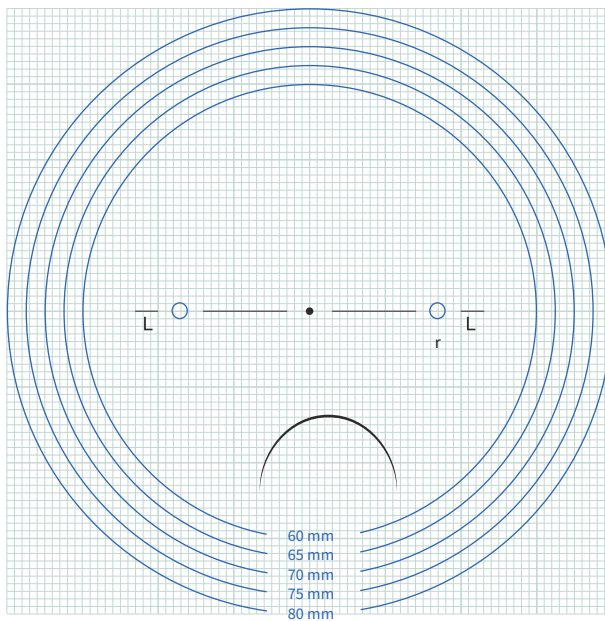

Myoless

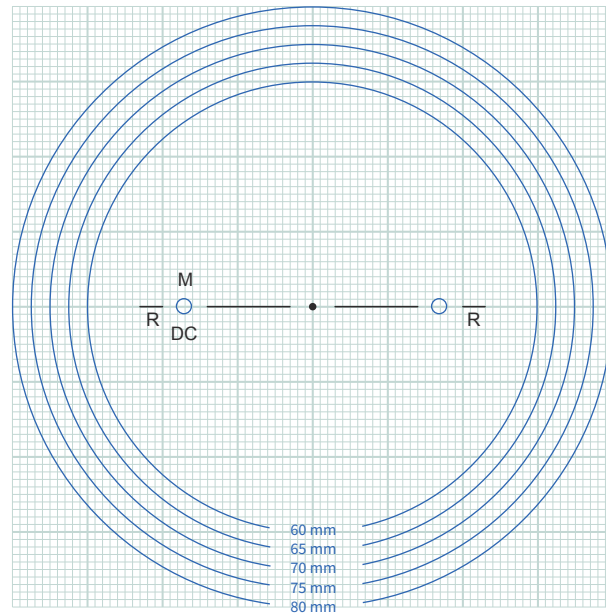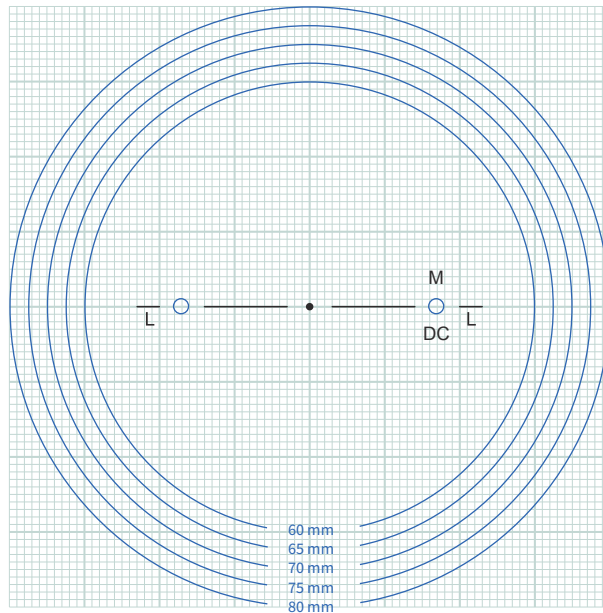

VERRES INDUSTRIE INSULAIRE

Avenue de la Libération
20600 BASTIA

France

